

MA R 水份分析仪

先进的解决方案，高质量的测量和水份分析



通讯接口



带文本信息的LCD显示器

功能

-  水份含量分析
-  干燥模式
-  GLP 规程
-  单位切换
-  多语言菜单
-  干燥质量定义

特点

测量精度高，性能优越

基于理想的测量参数，和高质量的干燥过程，MA R水份仪可以用来测不同水份含量的样品。

测量精度和干燥温度可选

智能控制加热模块操作保证最优干燥温度和快速精确测量和分析，保证了可靠重复性。大量的干燥配置文件，确保了通过各种方法预设温度。

完美的可读性和清晰的页面布局

大尺寸易于查看的LCD显示屏不仅在称重结果中提供了清晰的显示，还可以在干燥过程显示与之相关的消息以及相关图像的工作模式。

快捷键进入功能

可以使用面板上的快捷键一键进入相关的应用和功能，这些快捷键还可以自定义。

数据库作为干燥过程的支持



记录与样本相关的信息的干燥参数。可在数据库中对测量过程管理，使操作更加先进。

技术参数（LCD 显示屏）

	MA 50/1.R	MA 50.R	MA 110.R	MA 210.R
最大量程	50 g	50 g	110 g	210 g
可读性	0.1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
去皮范围最	- 50 g	- 50 g	- 110 g	- 210
大样品量	50 g	50 g	110 g	g 210 g
干燥温度范围	max. 160° C , (选配卤素灯管-最大温度250° C)			
水份含量可读性	0.0001%	0.001%	0.001%	0.001%
水份含量重复性		0.05% (ca. 2 g 样品), 0 .01% (ca. 10 g 样品)		
校准		外校		
显示屏		LCD (背光)		
按键板		14 键		
加热模块		红外灯管 (选配卤素灯管)		
数据库		6		
干燥配置		标准, 快速, 分步, 中性		
结束模式		手动, 自动, 时间定义, 用户自定义		
附加功能		样品追踪		
USB-A		1		
USB-B		1		
RS 232		1		
无线连接 (可选) ***		802.11 b/g/n		
电源适配器		230 V		
电源功耗		4 W (称量时) and max 450 W (干燥时)		
加热模块功耗		450 W		
工作温度		+10 ~ +40 ° C		
相对湿度		40 ~ 80%		
运输和存储温度		- 20 ~ +50 ° C		
最大样品高度		h= 20 mm		
秤盘尺寸		90 mm, h= 8 mm		
称重单元尺寸		3 33 × 206 × 190 mm		
净重		4.8 kg		
毛重		6.3 kg		
包装尺寸		4 70 × 380 × 336 mm		

*** 选配：水份仪无线连接模块*
*** 非凝结环境

尺寸

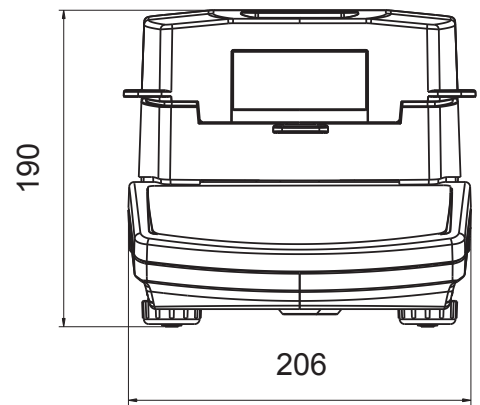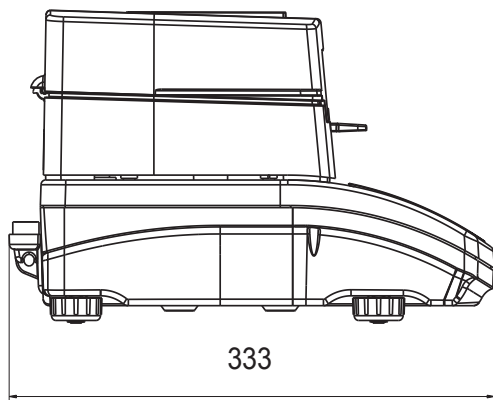

附件

称重台

- 实验室防震台

特殊目的称重

- 水蒸气渗透测定器

环境条件

- GT105K-12/Z温度控制器

外接设备

- Epson针式打印机
- 条码扫描仪

耗材

- 样品盘

数据线，转换器

- P0108: RS 232 数据线 (天平-电脑)
- P0151: RS 232 数据线(天平 - Epson 打印机)

专业软件

R-LAB

- 数据采集
- 数据统计分析
- 自定义图表和报告

E2R水份分析仪

- 同步干燥程序
- 在线预览干燥进程
- 干燥进程记录
- 单个或多个干燥报告

RAD KEY

- 连接天平和电脑

RADWAG 远程桌面

- 电脑，手机，平板远程操作
- 发送文本信息
- Windows10或者安卓系统

RADWAG开发软件

- 通讯功能（子功能）和通讯协议（公共通讯协议）
- 连接RADWAG的每台设备
- 质量控制库，包含了开发环境
- 完整的通讯协议
- 配备的用户手册为使用RADWAG仪器的员工提供不同的解决方案

LabView 驱动

- 在Labview环境操作RADWAG天平